

# Acura<sup>®</sup> manual digital reading pipettes

## SOCOREX 社製ピペット 825/826XS/835/855



### 825 micro

0.1 - 2 µL  
0.5 - 10 µL  
1 - 10 µL  
2 - 20 µL  
5 - 50 µL  
10 - 100 µL  
20 - 200 µL  
100 - 1000 µL



### 826 XS extra sharp

0.1 - 2 µL  
0.5 - 10 µL  
1 - 10 µL  
2 - 20 µL  
5 - 50 µL  
10 - 100 µL  
20 - 200 µL  
100 - 1000 µL



### 835 macro

0.2 - 2 mL  
0.5 - 5 mL  
1 - 10 mL



### 855 multi

0.5 - 10 µL  
5 - 50 µL  
20 - 200 µL  
40 - 350 µL

スイス SOCOREX 社が提供する  
スタンダードなピペットシリーズ  
機能性と多種多様な特色を持った、  
高品質なピペットシリーズを、ぜひ  
お手元に

最少0.1 µLから最大10mL、  
シングルチャンネル、8 チャンネル、  
12チャンネルの豊富なラインナップ  
よりお選び下さい

#### 特長

- ・エルゴノミクスに基づいて操作性を追求したデザイン
- ・SOCOREX 社オリジナルの Justip™ システム(チップイジェクター位置調整機能)により、各社ピペットチップに幅広く対応
- ・容量調整は分注ボタンを回すだけ
- ・ステップ状に分注容量調整
- ・視認性に優れた大型目盛り
- ・ユーザーキャリブレーション機能
- ・分解なしで 121°C20 分のオートクレーブ滅菌可能

#### 使用可能ピペットチップ例

- ・SOCOREX
- ・アイビス
- ・エッペンドルフ
- ・ニチリョー

# Acura<sup>®</sup> manual 825/826XS

- Acura<sup>®</sup> 825 シリーズは、最もスタンダードなシングルチャンネルピペット
- スタンダードな中に SOCOREX 社オリジナルの機能性を誇るピペット
- Acura<sup>®</sup> 826 シリーズは、825 シリーズを元に、シャフト長を短くするとともに軽量化されたシングルチャンネルピペット
- SOCOREX 社独自の設計により、軽力で滑らかに動作、長時間作業のユーザーに特にお勧めです




ユーザーキャリブレーション  
分注容量の微調整も簡単操作



キャップが自由に回転  
キャップと分注容量調整つまみが別々に回転  
分注操作中の設定容量ズレを防止



視認性に優れた大型目盛

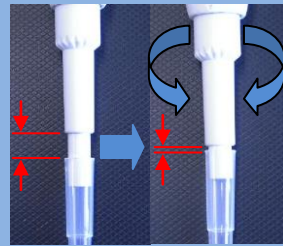

Justip<sup>™</sup>システム  
SOCOREX 社オリジナルのチップイジェクター位置調整機能により、各社ピペットチップに幅広く対応

## 性能表

型番	分注容量 (μL)	最小可変容量 (μL)	重量・シャフト長				精度 (E%)			再現性 (CV%)			
			825		826XS		最小容量	中間容量	最大容量	最小容量	中間容量	最大容量	
825.0002	826.0002	0.1-2	0.002	88	120	84	100	<±6.0	<±4.0	<±2.0	<5.0	<3.3	<1.5
825.0010	826.0010	0.5-10	0.01	88	120	84	100	<±2.5	<±1.8	<±1.0	<1.8	<1.2	<0.5
825.0010Y*	826.0010Y*	1-10	0.01	88	136	85	108	<±2.5	<±1.8	<±1.0	<2.5	<1.6	<0.7
825.0020	826.0020	2-20	0.02	88	135	85	108	<±2.5	<±1.8	<±1.0	<1.7	<1.1	<0.5
825.0050	826.0050	5-50	0.1	90	124	86	96.5	<±1.5	<±1.3	<±1.0	<1.0	<0.7	<0.4
825.0100	826.0100	10-100	0.1	92	124.5	87	97	<±1.5	<±1.2	<±0.8	<1.0	<0.6	<0.2
825.0200	826.0200	20-200	0.2	90	117	86	90	<±1.5	<±1.1	<±0.6	<0.6	<0.4	<0.2
825.1000	826.1000	100-1000	1	95	133.5	88	98	<±1.5	<±1.0	<±0.5	<0.5	<0.4	<0.2

性能値は、EN ISO8655 に基づき、20°C~25°Cの間の一定温度(±0.5°C)の条件で、滑らかに安定したベースの分注によって求められた値です。

\*0010Yタイプは 200 μL ピペットチップ用です。

# Acura<sup>®</sup> manual 835/855

- Acura<sup>®</sup> 835 シリーズは、分注容量 0.2 ~ 10mL の大容量シングルチャンネルピペット
- ガラスパストツールピペット使用可  
※PP仕様のみ
- Acura<sup>®</sup> 855 シリーズは、8チャンネル、および 12チャンネルのピペット
- 分注モジュールは 360度回転可能向きを調整してご使用下さい



ワンプッシュチップイジェクター



ノズルフィルター  
ピペット本体からのコンタミネーションを防止



360度 自在に回転



Justip<sup>™</sup>システム  
SOCOREX 社オリジナルのチップイジェクター位置調整機能により、各社ピペットチップに幅広く対応

## 性能表

型番	チャンネル	分注容量 (μL)	最小可変容量 (μL)	精度 (E%)			再現性 (CV%)		
				最小容量	中間容量	最大容量	最小容量	中間容量	最大容量
835.02	1	0.2-2mL	0.002mL	<±1.5	<±1.0	<±0.5	<0.5	<0.3	<0.2
835.02PP*									
835.05									
835.05PP*	1	0.5-5mL	0.01mL	<±1.5	<±1.1	<±0.6	<0.6	<0.5	<0.3
835.10									
835.10									
855.08.010	8	0.5-10	0.01	<±3.5	<±2.5	<±1.5	<3.0	<2.0	<1.0
855.08.050									
855.08.200									
855.08.350									
855.12.010	12	0.5-10	0.01	<±3.5	<±2.5	<±1.5	<3.0	<2.0	<1.0
855.12.050									
855.12.200									
855.12.350									

性能値は、EN ISO8655 に基づき、20°C~25°Cの間の一定温度(±0.5°C)の条件で、滑らかに安定したベースの分注によって求められた値です。

\*型番 PP 付はパストツールピペットアダプター付仕様 ノズルフィルターは付いておりません。

取扱代理店

NIKKO HANSEN & CO., LTD.

ニッコー・ハンセン株式会社

ハンセン事業部(営業部) 〒530-0043 大阪市北区天満 4-15-5  
TEL (06)4801-7751 FAX (06)6358-5580  
本社 〒554-0024 大阪市此花区島屋 4-1-131  
TEL (06)6460-1960 FAX (06)6460-1961

# Qualitips<sup>®</sup> Tips for Acura<sup>®</sup> micropipettes

## SOCOREX 社製ピペット用クオリテック

■ 袋入りタイプやラックタイプ、フィルター付タイプなど、豊富なラインナップから用途に合わせてお選び頂けます。

■ DNase/RNase フリーです。 ※フィルター付タイプのみ

■ フィルター付滅菌タイプはパイロジェンフリーです。

■ 121°C 20分オートクレーブ滅菌可能です。 ※フィルター付滅菌タイプを除く

■ 材質:PP(ポリプロピレン)、滅菌方法:電子線滅菌 ※滅菌タイプのみ

容量	型番	カラー	仕様		包装形態		Acura <sup>®</sup> マニュアルピペット Acura <sup>®</sup> 電動ピペット															
			形状	フィルター	滅菌	仕様	数量	825/826/925/926				835/935/936		855/955/956								
<b>容量 10 μL</b>																						
31.0 mm	309.0010B	ナチュラル	ウルトラマイクロ			袋	1000	●	●													
	309.0010R	ナチュラル	ウルトラマイクロ			ヒンジ付ラック	96 × 10	●	●													
31.0 mm	309.0010FR	ナチュラル	ウルトラマイクロ	あり	滅菌	ラック	96 × 10	●	●													
	302.0020B	ナチュラル	マイクロ			袋	1000	●	●													
45.6 mm	302.0020R	ナチュラル	マイクロ			ラック	96 × 10	●	●													
	302.0010AFB	ナチュラル	マイクロ	あり		袋	1000		●													
45.6 mm	302.0010FR	ナチュラル	マイクロ	あり	滅菌	ラック	100 × 10		●													
	302.0010GR	ナチュラル	ゲルローディング			ラック	204 × 4		●													
70.9 mm																						
	308.0020FS	ナチュラル	レギュラー	あり	滅菌	個包装	100 × 5			●	●	▲	▲									▲
51.0 mm	308.0020FR	ナチュラル	レギュラー	あり	滅菌	ラック	96 × 10			●	●	▲	▲									▲
	308.0020GFR	ナチュラル	ゲルローディング	あり	滅菌	ラック	204 × 4			●	●	▲	▲									
69.0 mm																						
	308.0100FR	ナチュラル	レギュラー	あり	滅菌	ラック	96 × 10					●	●									●
69.0 mm	308.0200GR	ナチュラル	ゲルローディング			ラック	204 × 4			●	●	●	●									
	308.0100GFR	ナチュラル	ゲルローディング	あり	滅菌	ラック	204 × 4					●	●	▲								
<b>容量 100 μL</b>																						
49.4 mm	307.0200B	ナチュラル	10,50,100 目盛			袋	500 × 2			●	●	●	●	●								●
	327.0200B	黄	10,50,100 目盛			袋	500 × 2			●	●	●	●	●								●
49.4 mm	327.0200R	黄	10,50,100 目盛			ヒンジ付ラック	96 × 10			●	●	●	●	●								●
	309.0200B	ナチュラル	レギュラー			袋	500 × 2			●	●	●	●	●								●
49.7 mm	309.0200R	ナチュラル	レギュラー			ラック	96 × 10			●	●	●	●	●								●
	329.0200B	黄	レギュラー			袋	500 × 2			●	●	●	●	●								●
49.7 mm	329.0200R	黄	レギュラー			ラック	96 × 10			●	●	●	●	●								●
	308.0200LFS	ナチュラル	ロング	あり	滅菌	個包装	100 × 5															●
90.9 mm	308.0200LFR	ナチュラル	ロング	あり	滅菌	ラック	204 × 8															●

※▲はチップの最大容量まで

	型番	カラー	仕様			包装形態		Acura <sup>®</sup> マニュアルピペット Acura <sup>®</sup> 電動ピペット															
			形状	フィルター	滅菌	仕様	数量	825/826/925/926				835/935/936			855/955/956								
容量								0.1-2μL	0.5-10μL	1-10μL(Y)	2-20μL	5-50μL	10-100μL	20-200μL	100-1000μL	0.2-2mL	0.5-5mL	1-10mL	0.5-10μL	5-50μL	20-200μL	40-350μL	
<b>容量 300 μL</b>																							
	308.0300AFB	ナチュラル	レギュラー	あり		袋	1000								●							●	▲
58.8 mm	308.0300FR	ナチュラル	レギュラー	あり	滅菌	ラック	96 × 10								●							●	▲
<b>容量 350 μL</b>																							
	308.0350B	ナチュラル	レギュラー			袋	1000				●	●	●									●	●
58.8 mm	308.0350R	ナチュラル	レギュラー			ラック	96 × 10				●	●	●									●	●
<b>容量 1000 μL</b>																							
	307.1000B	ナチュラル	200,500,900 目盛			袋	250 × 4								●								
79.0 mm	307.1000R	ナチュラル	200,500,900 目盛			ヒンジ付ラック	60 × 10								●								
	309.1000B	ナチュラル	レギュラー			袋	250 × 4								●								
72.0 mm	309.1000R	ナチュラル	レギュラー			ラック	60 × 8								●								
	319.1000B	青	レギュラー			袋	250 × 4								●								
72.0 mm	319.1000R	青	レギュラー			ラック	60 × 8								●								
	309.1000FS	ナチュラル	レギュラー	あり	滅菌	個包装	100 × 5								●								
88.6 mm	309.1000FR	ナチュラル	レギュラー	あり	滅菌	ラック	100 × 10								●								
	309.1000AFB	ナチュラル	レギュラー	あり		袋	1000								●								
<b>容量 2mL</b>																							
	312.02	ナチュラル	レギュラー			袋	250 × 2									●							
115.5 mm																							
<b>容量 5mL</b>																							
	312.05B	ナチュラル	1~5mL 0.5mL 刻み目盛			袋	250 × 2										●						
123.2 mm	312.05R	ナチュラル	1~5mL 0.5mL 刻み目盛			ラック	50 × 2										●						
<b>容量 10mL</b>																							
	312.10	ナチュラル	レギュラー			袋	100 × 3											●					
150.0 mm																							

※▲はチップの最大容量まで

空ラック	型番	適合チップ	仕様	数量
	309.0010ER	309.0010B (10 μL)	ヒンジ付ラック	10
	302.0020ER	302.0020B (10 μL)	カバー付ラック	10
	308.0350ER	308.0350B (350 μL)	カバー付ラック	10
	319.1000ER	309.1000B (1000 μL) 319.1000R (1000 μL)	カバー付ラック	8
	312.10ER	312.10 (10mL)	カバー付ラック	4

取扱代理店

NIKKO HANSEN & CO., LTD.

ニッコー・ハンセン株式会社

ハンセン事業部(営業部) 〒530-0043 大阪市北区天満 4-15-5  
TEL (06)4801-7751 FAX (06)6358-5580

本 社 〒554-0024 大阪市此花区島屋 4-1-131  
TEL (06)6460-1960 FAX (06)6460-1961